

ARTISTRY DERMASONIC

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД ЗА КОЖЕЙ НА ДОМУ



ARTISTRY

Прибор ARTISTRY™ Dermasonic

Верхний слой кожи защищает ее от влияния окружающей среды и предотвращает потерю кожей питательных веществ.

В результате компоненты косметических средств проникают не глубже поверхностных слоев кожи. Мы знаем, как это исправить!

Прибор ARTISTRY™ Dermasonic подготавливает кожу к средствам по уходу и помогает полезным компонентам проникать в более глубокие слои кожи для достижения максимального эффекта.

Прибор Dermasonic имеет две активные насадки:

- Ультразвуковая насадка
- Дерма-ион-гальваническая насадка



**РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**
(с титановым покрытием)

КРЫШЕЧКА

Цветной светодиод

Кнопка
**ПИТАНИЯ/УРОВНЯ
ВИБРАЦИЙ**

**ЛОПАТКА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
НАСАДКИ**

**ИНДИКАТОР
УРОВНЯ
ВИБРАЦИЙ**


ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОД

**КНОПКА
ВЫБОРА РЕЖИМОВ**

**ИНДИКАТОР
режима**

HYDRATE

ARTISTRY

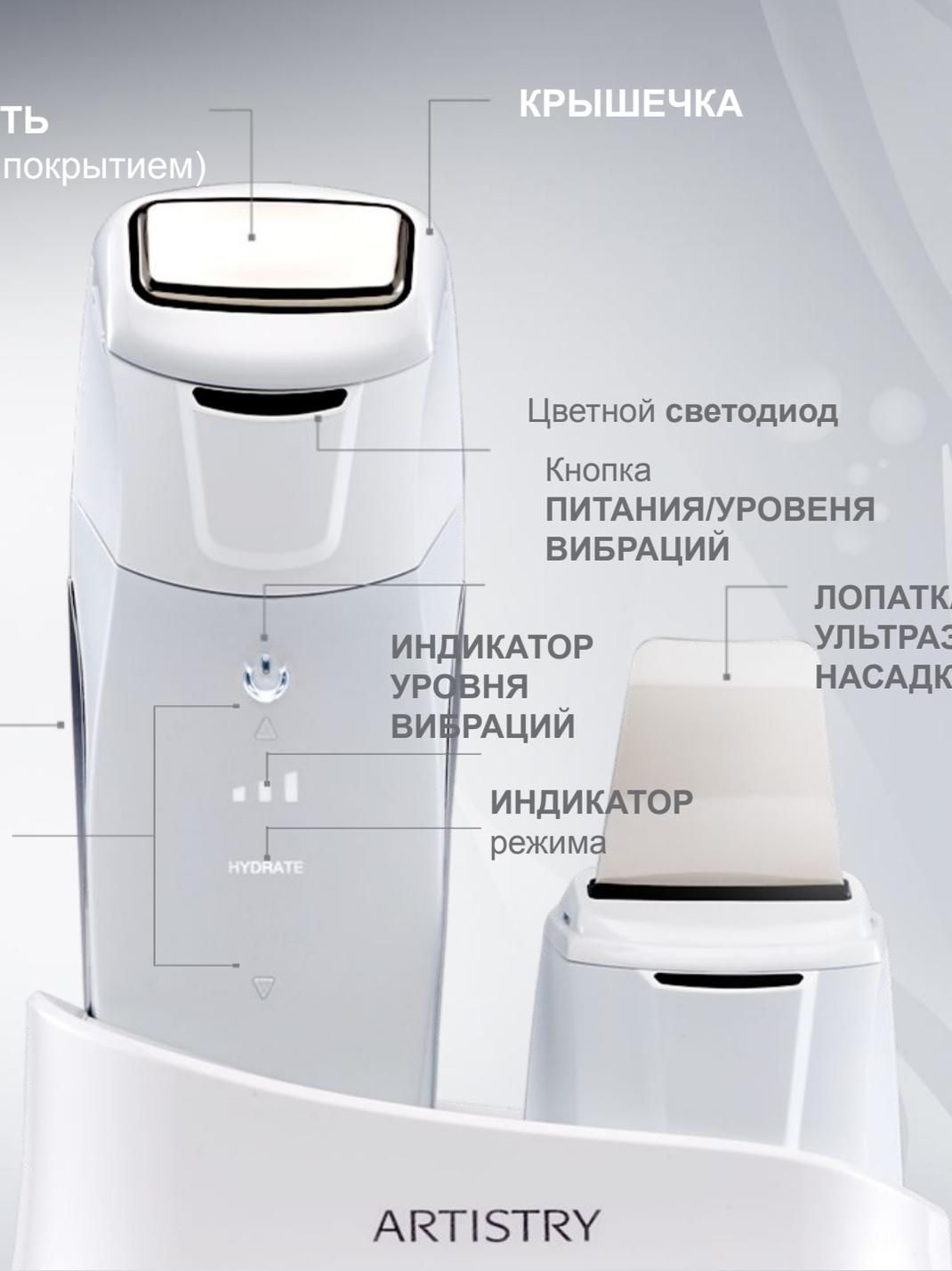

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАСАДКА

Производит ультразвуковые колебания частотой 30000 Гц, благодаря которым при контакте с водой или ARTISTRY™ Тоником образуется эффект потока мельчайших пузырьков. Пузырьки на высокой скорости проникают в поры кожи, удаляя черные точки, грязь и остатки макияжа.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Удалите макияж и хорошо очистите кожу.
- Установите ультразвуковую насадку
- Смочите кожу водой или нанесите ARTISTRY Тоник
- Слегка проведите насадкой по поверхности кожи, как показано
- Протрите кожу после использования прибора
- Протрите ультразвуковую насадку ватным диском.



ОЧИЩЕНИЕ

ДЕРМА-ИОН-ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ НАСАДКА

Дерма-ион-гальваническая насадка стимулирует и массирует кожу, способствуя более глубокому проникновению сывороток ARTISTRY. Ее эффективность обеспечивает оптимизация ионных потоков в 5 режимах работы.

- **Дерма-ионный** – мощный массаж кожи для усиления антивозрастного эффекта* (режимы: «ПРОТИВ МОРЩИН» и «ЛИФТИНГОВЫЙ»).
- **Гальванический** – прямой поток ионов для обеспечения максимального проникновения продуктов по уходу за кожей (режимы: «ВИТАМИН С», «УВЛАЖНЯЮЩИЙ», «ЛУЧИСТАЯ КОЖА»).



*При использовании с продуктами ARTISTRY

ДЕРМА-ИОН-ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ НАСАДКА

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Удалите макияж и хорошо очистите кожу.
- Установите гальваническую насадку.
- Нажмите на кнопку питания и выберите режим.
- Равномерно нанесите на кожу ARTISTRY™ Сыворотку.
- Придерживайте электродную часть (металлические панели) прибора Dermasonic.
- Проведите насадкой по поверхности кожи в указанном направлении.
- Прибор ARTISTRY Dermasonic работает автоматически при контакте с кожей.
- Не нажимайте на кожу с усилием.
- Проведите прибором один раз по щекам в сторону от центра лица к внешним сторонам.
- В зоне носа и нижней челюсти проведите 1-2 раза.
- Удалите остатки косметического средства с дерма-ион-гальванической насадкой с помощью ватного диска.



РЕЖИМЫ

«ВИТАМИН С»

для более глубокого проникновения активного компонента - витамина С



ARTISTRY™ Сыворотка «Витамин С + дикий ямс»



используйте в течение 60 секунд

«УВЛАЖНЯЮЩИЙ»

для повышения увлажненности кожи



ARTISTRY HYDRA-V™ Питательная концентрированная сыворотка для кожи лица



используйте в течение 90 секунд

«ЛУЧИСТАЯ КОЖА»

для улучшения цвета лица



ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Полирующий лосьон интенсивного действия



используйте в течение 90 секунд

«ЛИФТИНГОВЫЙ»

для подтяжки кожи и придания ей упругости



ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Сыворотка для подтяжки кожи лица с антивозрастным эффектом



используйте в течение 90 секунд

«ПРОТИВ МОРЩИН» для улучшения состояния кожи с видимыми морщинами



ARTISTRY YOUTH XTEND™ Концентрированная сыворотка с эффектом восстановления кожи



используйте в течение 90 секунд

ARTISTRY DERMASONIC

Повысьте эффективность своих
продуктов по уходу за кожей с
Прибором ARTISTRY™ Dermasonic!

<< [Смотрите видеоинструкцию](#) >>