



SAM иммобилизация таза II





SAM II

- Шаг 1:

- Опорожните карманы пострадавшего и снимите предметы, прикрепленные к его поясу.





SAM II

- **Шаг 2:**

– Пропустите SAM под бедрами и сдвиньте его вверх в правильное положение до межвертельной линии берцовых костей.





SAM II

- Шаг 3:

- Пропустите ремень через пряжку и потяните, чтобы затянуть, преодолевая противодействие, пока не услышите или не почувствует щелчок.





SAM II

- Шаг 4:

- Поддерживайте натяжение и прикрепите липучку к поясу спереди.






SAM II

- Шаг 5:

- Зафиксируйте лодыжки - не слишком плотно.
(Обратите внимание на использование турникета для этой цели.)

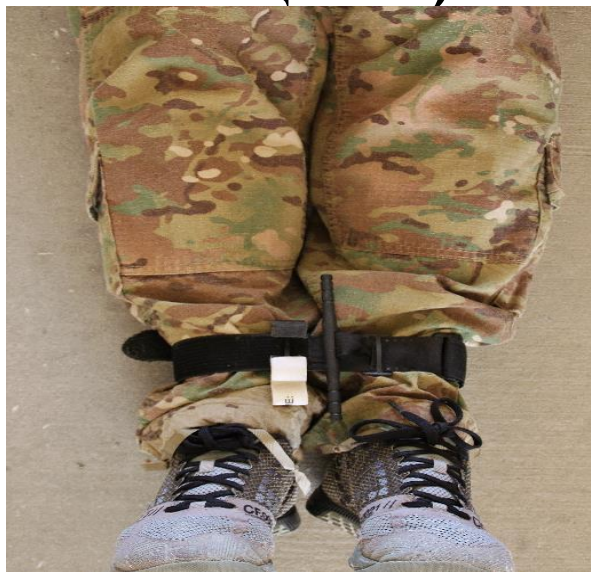



- Видео

SAM II